

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019763

International filing date: 24 December 2004 (24.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2003-430557  
Filing date: 25 December 2003 (25.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 21 February 2005 (21.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

24.12.2004

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日                      2 0 0 3 年 1 2 月 2 5 日  
Date of Application:


出 願 番 号                      特 願 2 0 0 3 - 4 3 0 5 5 7  
Application Number:  
[ST. 10/C]:                      [ J P 2 0 0 3 - 4 3 0 5 5 7 ]

出      願      人                      キヤノン株式会社  
Applicant(s):

2 0 0 5 年    2 月    3 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川

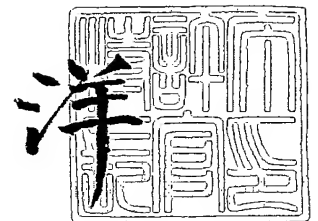

出証番号    出証特 2 0 0 5 - 3 0 0 6 3 9 0

【書類名】 特許願  
【整理番号】 258738  
【提出日】 平成15年12月25日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【国際特許分類】 C12Q 1/68  
【発明者】  
    【住所又は居所】 東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号 キヤノン株式会社内  
    【氏名】 塚田 護  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000001007  
    【氏名又は名称】 キヤノン株式会社  
【代理人】  
    【識別番号】 100123788  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 宮崎 昭夫  
    【電話番号】 03-3585-1882  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100088328  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 金田 暢之  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100106297  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 伊藤 克博  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100106138  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 石橋 政幸  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 201087  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1  
    【物件名】 明細書 1  
    【物件名】 要約書 1

**【書類名】 特許請求の範囲****【請求項 1】**

検体中に含まれる H L A - D P 型のアリルの同定に利用し得る多数のプローブからなるプローブセットであって、

前記多数のプローブのそれぞれが、明細書中のアリルリスト中の各アリルの配列中の大文字で表記された塩基を含む部分配列を有することを特徴とするプローブセット。

**【請求項 2】**

明細書中の表 1 に記載されるプローブ群、表 2 に記載されるプローブ群、表 3 に記載されるプローブ群及び表 4 に記載されるプローブ群から選ばれた 1 つのプローブ群からなる請求項 1 に記載のプローブセット。

**【請求項 3】**

検体からの試料中に含まれる H L A - D P 型のアリルをプローブセットを用いて同定する方法であって、

該プローブセットが請求項 1 または 2 に記載のプローブセットであることを特徴とする H L A - D P 型のアリルを同定する方法。

**【書類名】 明細書****【発明の名称】 HLA-DPアレルを同定するためのプローブセット及び特定方法****【技術分野】****【0001】**

本発明は、人のHLA-DPアレルを同定するためのプローブセット及び特定方法に関する。

**【背景技術】****【0002】**

人白血球のHLA-DP型の各アレルについては、従来から血清学的レベルのタイピングが行われてきた。この場合、特別なサンプル処理を必要とせず、抗原抗体反応で容易にタイピングが可能である反面、同定できる内容はアミノ酸配列の違いを区別できるレベルを4桁以上の数字での命名法における3、4桁目とした場合、最初の2桁の数字が血清学的レベルのタイピングで同定可能なレベルである（日本組織適合性学会HLA標準化委員会「アレル表記法と結果報告の原則について2000」<http://jshi.umin.ac.jp/standardization/hyoki.html>参照）。

**【0003】**

その他のゲノム抽出を伴うタイプの市販キットの多くは、各アレルを個別に同定可能な精度のものではなく、複数のアレルをセットとして区別しているのが現状である。また最も詳細な多型解析を可能とするSBT（Sequencing Based Typing）法に基づくキットにしても、たいていのサンプルはヘテロ接合体であるため、ambiguityの問題を一度に解決できず、再検査を必要とすることが多い。こうした問題を伴うアレルは、IHWG学会の<http://www.ihwg.org/protocols/sbt/ambiguities2.pdf>にまとめて紹介されている。

**【非特許文献1】**（日本組織適合性学会HLA標準化委員会「アレル表記法と結果報告の原則について2000」（<http://jshi.umin.ac.jp/standardization/hyoki.html>のサイト）

**【非特許文献2】** <http://www.ihwg.org/protocols/sbt/ambiguities2.pdf>

**【発明の開示】****【発明が解決しようとする課題】****【0004】**

一方、近年は高度医療の発達に伴い、臓器移植などの際に詳細なタイピングが要求されるほか、糖尿病や癌、その他多因子病においても、薬剤投与との関連が示唆され、医療行為に対するエビデンスが求められている。こうした背景から、各アレルを個別に同定可能な試験方法が望まれており、本発明はかかる要望に対してHLA-DPの各アレルを個別に同定するために有用であるプローブセット及びそれを用いたHLA-DPのアレルの同定方法を提供することを目的とする。

**【課題を解決するための手段】****【0005】**

本発明にかかるHLA-DPアレルを同定するためのプローブセットは、検体中に含まれるHLA-DP型のアレルの同定に利用し得る多数のプローブからなるプローブセットであって、前記多数のプローブのそれぞれが、明細書中のアレルリスト中の各アレルの配列中の大文字で表記された塩基を含む部分配列を有することを特徴とするプローブセットである。

**【0006】**

また、本発明にかかるHLA-DPアレルの同定方法は、検体からの試料中に含まれるHLA-DP型のアレルをプローブセットを用いて同定する方法であって、該プローブセットが上記の構成のプローブセットであることを特徴とするHLA-DP型のアレルを同定する方法である。

**【発明の効果】****【0007】**

本発明にかかるプローブセット及びそれを用いたHLA-DPアレルの同定によって、臓器移植、癌、糖尿病、その他多因子病において必要とされる体質判定、テーラーメイド医療に貢献することができる。

**【発明を実施するための最良の形態】**

## 【0008】

本発明のプローブセットを構成する各プローブは後述するアレルリストの各アレルにおける大文字表記の塩基を含む部分配列をそれぞれが有するものである。好ましくは、大文字の塩基を含む10～30の塩基からなる部分を選択し得られた部分塩基配列からなるプローブを用いてプローブセットを構成する。具体例としては、後述の表1～4のプローブリスト1～4に挙げられた各プローブ群からプローブセットを構成することができる。例えば、プローブリスト1における0番のプローブは、DPA1\*010301の最初の大文字（G）が含まれている部分「acgcatagaccaacaggG」の18塩基配列からなるものであり、プローブリスト2におけるプローブ0番もまた同じアレルの最初の大文字のGを含む部分「gcatagaccaacaggG」の16塩基配列からなるものである。

## 【0009】

なお、後述のアレルリストにおける「DPA1\*」及び「DPB1\*」で示されている番号は、各アレルに付された固有の番号であり、日本組織適合性学会HLA標準化委員会による「アレル表記法」に従ったものである。

## 【0010】

本発明にかかるアレルの同定方法におけるプローブによるアレルの検出には、例えば、2つの方法が可能である。一つはハイブリダイゼーション法によって検出する場合と、もう一つはPCR法によってハイブリダイゼーションをすることなしに直接検出する場合である。いずれの場合も、好ましくは十数個から二十数個程度の長さのオリゴヌクレオチドに、大文字で表した塩基を含むようにプローブが設計される。

## 【0011】

また、本発明において提供されるプローブアレイは、各アレルを個別に同定するための変異塩基の組をプローブとして選択する位置で提示しているともいえる。この変異塩基を検出するための方法にもハイブリダイゼーション法による検出方法と、PCR法によってハイブリダイゼーションをすることなしに直接検出する方法が好適に利用できる。これらの場合にも、好ましくは十数個から二十数個程度の長さのオリゴヌクレオチドに、大文字で表した塩基を含むようにプローブが設計される。

## 【0012】

ハイブリダイゼーションによって変異を検出する場合は、プローブの中心付近にミスマッチが（即ち大文字で表した変異塩基が）来るようにプローブを設計したほうが、フルマッチとミスマッチの配列間でT<sub>m</sub>に差がつきやすく、ハイブリダイゼーションの反応温度を調節することによって、両者を分離しやすい。

## 【0013】

一方PCR法によって直接変異を検出する場合は、酵素がアニールした二本鎖を認識して伸長しないよう、むしろ3'末端側にミスマッチを配置することが行われる。またAllel Specific Primerのように、3'末端から2つ目にミスマッチを配置し、3個目に人為的にミスマッチを追加したり（東洋紡（株））、3'末端側にミスマッチを配置するがライゲーションによって、プローブの環状化を行う方法（アマシャムバイオサイエンス（株））、TaqMan-MGB法（ABI社）LNAを使った3'末端ミスマッチ（プロリゴ・ジャパン（株））など、いくつかのバリエーションが可能である。

## 【0014】

例えば、DPA1\*020101の1番目の大文字表記の部分は「gtacagacCcatagac」であり、これに対応する同じ血清型のDPA1\*020102の対応する部分は「ggtacagacgcatagac」であり、DPA1\*020101の大文字の塩基で変異が生じている。これらの部分の一方の配列からなるプローブを用いれば、他方とはミスマッチによって区別が可能となる。

## 【実施例】

## 【0015】

## 実施例1

アマシャムバイオサイエンスのGFX Genomic Blood DNA Purification Kitを使って、人の血液1mlからDNAの抽出を行った。以下にプロトコルを示す。

## 血液1ml

- ↓ +RBC Lysis Solution (溶血)
- ↓ +血液サンプル (穏やかに混和)
- ↓ 室温、5分間
- ↓ 12,000~16,000×g、20秒間遠心
- ↓ 上清を20~50  $\mu$ l 残して捨てる
- ↓ 沈殿物を再懸濁
- ↓ +Extraction Solution (激しくボルテックス)
- ↓ 室温、5分間 (DNAの抽出)
- ↓ Collection TubeにGFX Columnをセット
- ↓ 溶出バッファーを70℃に加温
- ↓ +サンプル
- ↓ 5,000×g、1分間遠心 (DNAの結合)
- ↓ +Extraction Solution (洗浄)
- ↓ 5,000×g、1分間遠心
- ↓ +Wash Solution (洗浄)
- ↓ 12,000×g、3分間遠心
- ↓ GFX Columnを遠心チューブにセット
- ↓ +純水で溶出
- ↓ 室温、1分間
- ↓ 5,000~8,000×g、1分間遠心

230  $\mu$ l に濃縮調整………溶液 (1)

次にキアゲン社のQuantiTect SYBR Green PCR Kit、ABI社のGeneAmp5700を使って、定量PCRを行った。反応組成およびプロトコルを以下に示す。

1) 反応組成/well (96wellマイクロプレート)

QuantiTect SYBR Green 2×プレミクス：10  $\mu$ l溶液 (1)：1  $\mu$ l表1または表2-1~2-3の各プローブ：1  $\mu$ lミックスプライマ(10 pmol/ $\mu$ l)注)：4  $\mu$ l超純水：4  $\mu$ l(合計：20  $\mu$ l)注) 以下の配列を持つ各10 pmol/ $\mu$ lの水溶液各1  $\mu$ l

AAACACGGTCACCTCAGGGGGAT (配列番号：245)

GGCCTGAGTGTGTTGGAACG (配列番号：246)

CCAGCTCGTAGTTGTGTCTGCA (配列番号：247)

2) PCR プログラム

94℃：180secの後に (94℃：10sec+66℃：10sec+72℃：20sec) の30 cyclesを行った。

【0016】

5700ソフトウェア画面上のAmp PlotおよびDissociationカーブ、表1のプローブ群を用いた場合には表5のリストを、表2-1~2-2のプローブ群については表6-1~6-4のリストを参照して、DPA1\*010301とDPB1\*0901であると同定された。

【0017】

## 実施例2

人の血液1mlからのDNA抽出は、実施例1と同様に行った。次にタカラバイオ (株) のEx Taq、ABI社のPCR装置9700を使って、人HLA-DPのPCRを行った。反応組成およびプロトコルを以下に示す。

1) 反応組成/tube

Ex Taq 2×プレミクス：20  $\mu$ l溶液 (1)：3  $\mu$ lCy-3 dUTP (1mM)：2  $\mu$ l

ミックスプライマ(10 pmol/ $\mu$ l)注) : 7 $\mu$ l

超純水 : 8 $\mu$ l

(合計 : 40 $\mu$ l)

注) 以下の配列を持つ各10 pmol/ $\mu$ lの水溶液各1 $\mu$ l

AAACACGGTCACCTCAGGGGAT (配列番号 : 2 4 5)

GGCCTGAGTGTGGTTGGAACG (配列番号 : 2 4 6)

CCAGCTCGTAGTTGTGTCTGCA (配列番号 : 2 4 7)

CCATGTGTCAACTTATGCC (配列番号 : 2 4 8)

AGAATTACCTTTTCCAG (配列番号 : 2 5 0)

AGAATTACGTTTTCAG (配列番号 : 2 5 1)

## 2) PCR プログラム

94℃ : 180secの後に、(94℃ : 10sec + 66℃ : 10sec + 72℃ 20sec) の30cyclesを行った。

## 【0 0 1 8】

反応終了後、精製用カラム (QIAGEN QIAquick PCR Purification Kit) を用いて未反応のdNTPs等のClean Upを行った。

## 【0 0 1 9】

一方上述の検体に対して、アレルを同定するためのDNAマイクロアレイを作製した。作製の方法は、特開平11-187900号公報の実施例に従った。固相化のための官能基はSH基とし、ガラス基板上にシランカップリング処理を行い、2価性試薬のEMCS (N-(6-Maleimidocaproyloxy)succinimide) 介してSH基と架橋した。各ドットのプロープには、表3のプロープ群および表4のプロープ群のそれぞれの各プロープを個々に用いた。

## 【0 0 2 0】

次に先ほどの検体と作製したDNAマイクロアレイを用いて、ハイブリダイゼーションを行った。DNAマイクロアレイは予めBSA (牛血清アルブミン) 1wt%加PBSで2時間ブロッキングした。検体はその塩濃度がPBSと等しくなるように、また0.1wt%SDS (ドデシル硫酸ナトリウム)、25% Formamideとなるように調整し、その50 $\mu$ lを、先ほどのブロッキング済みDNAマイクロアレイと60℃で2時間反応させ、未反応物を2 $\times$ SSC溶液 (NaCl 300mM、Sodium Citrate (trisodium citrate dihydrate, C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>Na<sub>3</sub> · 2H<sub>2</sub>O) 30mM、p.H. 7.0) で3回、続いて0.1 $\times$ SSC溶液で2回洗浄した後風乾させ、Axon社製、GenePix 4000Bを用いて蛍光測定を行った。つぎに表3のプロープ群を用いた場合は表7のリストを、表4のプロープ群を用いた場合は表8のリストを参照して、DPA1\*010301とDPB1\*0901であると同定された。

アレルリスト

DPA1\*010301 : ccatgtgtcaacttatgccgcgtttgtacagacgcatagaccaacaggGgagtttatgtttgaatttgatgaAgatgagatgttctatgttgatctggacaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttgccAagccttttctttgaggctcagggcgggctggctaacattgctatatattgaacaacaacttgaataccttgatccagcgttccaaccacactcaggccaccaac (配列番号 : 1) ;

DPA1\*010302 :

gcgtttgtacagacgcatagaccaacaggAgagtttatgtttgaatttgatgaagatgagatgttctatgttgatctggacaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttgccaagccttttctttgaggctcagggcgggctggctaacattgctatatattgaacaacaacttgaataccttgatccagcgttccaaccacactcaggccaccaac (配列番号 : 2) ;

DPA1\*0104 :

gccgcgtttgtacagacgcatagaccaacaggggagtttatgtttgaatttgatgaCgatgagatgttctatgttgatctggacaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttgccaagccttttctttgaggctcagggcgggctggctaacaattgctatatattgaacaacaacttgaataccttgatccagcgttccaaccacactcaggccaccaac (配列番号 : 3) ;

DPA1\*0105 :

gccgcgtttgtacagacgcatagaccaacaggggagtttatgtttgaatttgatgaagatgagatgttctatgttgatctggacaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttgccaagccttttctttgaggctcagggcgggctggctaaca



ttgctatatgaacaacaacttgaataccttgatccagcgttccaaccacactcaggccgccaat (配列番号: 4)  
);

DPA1\*0106:

ccatgtgtcaacttatgccgcgtttgtacagacgcatagaccaacaggggagtttatgtttgaatttgatgaagatgagc  
agttctatgtggatctggataaAaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccaagccttttcctttgaggctcag  
ggcgggctggctaacattgctatatgaacaacaacttgaataccttgatccagcgttccaaccacactcaggccacca  
c (配列番号: 5);

DPA1\*0107:

catgtgtcaacttatgccgcgtttgtacagacgcatagaccaacaggggagtttatgtttgaatttgatgaagatgagat  
gttctatgtggatctggacaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccaaAccttttcctttgaggctcagg  
gcgggctggctaacattgctatatgaacaacaacttgaataccttgatccagcgttccaaccacactcaggccaccaac  
(配列番号: 6);

DPA1\*0108:

ccatgtgtcaacttatgccgcgtttgtacagacgcatagaccaacaggggagtttatgtttgaatttgatgaCgatgaga  
tgttctatgtggatctggacaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccGagccttttcctttgaggctcag  
ggcgggctggctaacattgctatatgaacaacaacttgaataccttgatccagcgttccaaccacactcaggccacca  
c (配列番号: 7);

DPA1\*020101:

ccatgtgtcaacttatgccgcgtttgtacagacCcatagaccaacaggggagtttatgtttgaatttgatgaagatgagc  
agttctatgtggatctggataaAaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccgagccttttcctttgaggctcag  
ggcgggctggctaacattgctatatgaacaacaacttgaataccttgatccagcgttccaaccacactcaggccgcca  
T (配列番号: 8);

DPA1\*020102:

ccatgtgtcaacttatgccgcgtttgtacagacgcatagaccaacaggggagtttatgtttgaatttgatgaagatgagc  
agttctatgtggatctggataaAaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccgagccttttcctttgaggctcag  
ggcgggctggctaacattgctatatgaacaacaacttgaataccttgatccagcgttccaaccacactcaggccgcca  
T (配列番号: 9);

DPA1\*020103:

ccatgtgtcaacttatgccgcgtttgtacagacgcatagaccaacaggggagtttatgtttgaatttgatgaagatgagc  
Agttctatgtggatctggacaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccgagccttttcctttgaggctcag  
ggcgggctggctaacattgctatatgaacaacaacttgaataccttgatccagcgttccaaccacactcaggccgcca  
T (配列番号: 10);

DPA1\*020104:

gcgtttgtacaaacccatagaccaacaggggagtttatgtttgaatttgatgaagatgagcagttctatgtggatctgga  
taaAaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccgagccttttcctttgaggctcaggcgggctggctaacattg  
ctatatgaacaacaacttgaataccttgatccagcgttccaaccacactcaggccgccaat (配列番号: 11)  
;

DPA1\*020105:

ccatgtgtcaacttatgccgcgtttgtacagacgcatagaccaacaggAgagtttatgtttgaatttgatgaagatgagc  
Agttctatgtggatctggacaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccgagccttttcctttgaggctcag  
ggcgggctggctaacattgctatatgaacaacaacttgaataccttgatccagcgttccaaccacactcaggccgcca  
T (配列番号: 12);

DPA1\*020106:

ccatgtgtcaacttatgccgcgtttgtacagacCcatagaccaacaggggagtttatgtttgaatttgatgaagatgagc  
agttctatgtggatctggaTaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccgagccttttcctttgaggctcag  
ggcgggctggctaacattgctatatgaacaacaacttgaataccttgatccagcgttccaaccacactcaggccgcca  
T (配列番号: 13);

DPA1\*020201:

aacttatgccatgtttgtacagaccatagaccaacaggAgagtttatgtttgaatttgatgaagatgagcagttctatg  
tggatctggaTaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccgagccttttcctttgaggctcaggcgggctg

gctaacattgctatattgaacaacaacttgaataccttgatccagcggtccaaccacactcaggccgccaat (配列番号 : 1 4) ;

DPA1\*020202 :

ccatgtgtcaacttatgccatgtttgtacagacCcatagaccaacaggAgagtttatgtttgaatttgatgaagatgagc  
Agttctatgtggatctggacaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccgagcctttcctttgaggctcag  
ggcgggctggctaacattgctatattgaacaacaacttgaataccttgatccagcggtccaaccacactcaggccgcca  
T (配列番号 : 1 5) ;

DPA1\*020203 :

atgtgtcaacttatgccaTgtttgtacagacccatagaccaacaggggagtttatgtttgaatttgatgaagatgagcag  
ttctatgtggatctggacaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccgagcctttcctttgaggctcaggg  
cgggctggctaacattgctatattgaacaacaacttgaataccttgatccagcggtccaaccacactcaggccgccaat  
(配列番号 : 1 6) ;

DPA1\*0203 :

ccatgtgtcaacttatgccgctttgtacagacCcatagaccaacaggggagtttatgtttgaatttgatgaagatgaga  
tgttctatgtggatctggacaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccgagcctttcctttgaggctcag  
ggcgggctggctaacattgctatattgaacaacaacttgaataccttgatccagcggtccaaccacactcaggccgcca  
T (配列番号 : 1 7) ;

DPA1\*0301 :

gccatgtttgtacagacccatagaccaacaggggagtttatgtttgaatttgatgaagatgagatgttctatgtggatct  
ggacaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccaagcctttcctttgaggctcagggcgggctggctaaca  
ttgctatattgaacaacaacttgaataccttgatccagcggtccaaccacactcaggccaccaac (配列番号 : 1  
8) ;

DPA1\*0302 :

ccatgtgtcaacttatgccaTgtttgtacagacccatagaccaacaggggagtttatgtttgaatttgatgaagatgaga  
tgttctatgtggatctggacaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccaagcctttcctttgaggctcag  
ggcgggctggctaacattgctatattgaacaacaacttgaataccttgatccagcggtccaaccacactcaggccacca  
c (配列番号 : 1 9) ;

DPA1\*0401 :

gccgctttgtacagacgcatagaacaacaggagagtttatgtttgagtttgatgatgatgagatgttctatgtggatct  
ggacaagaaggagaccgtctggcatctggaggagtttggccgagcctttcctttgaggctcagggcgggctggctaaca  
ttgctatattgaacaacaacttgaatacgcTatccagcggtccaaccacactcaggccgccaat (配列番号 : 2  
0) ;

DPB1\*010101 :

agaattacgtgtaccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtacgcgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggGtAtgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgagtcc (配列番号 : 2 1) ;

DPB1\*010102 :

aattacgtgtaccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccg  
ggaggagtacgcgcgttcgacagcgacgtgggAgagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagtact  
ggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacgag  
gccgtgaccctgcagcgccga (配列番号 : 2 2) ;

DPB1\*020102 (配列番号 : 2 3) :

agaattaccttttcaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtGcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgAggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatGtgacagacacaactacgagctggGcg  
ggcccatgaccctgcagcgccgagtcc (配列番号 : 2 4) ;

DPB1\*020103 :

agaattaccttttcaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtGcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgaGaggagta

ctggaacagccagaaggacatcctggaggaggagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggggcg  
ggcccatgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 2 5 ) ;

DPB1\*020104 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggaggagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggggcg  
ggcccatgaccctgcagcgccga (配列番号 : 2 6 ) ;

DPB1\*020105 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaAgagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggaggagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggggcg  
ggcccatgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 2 7 ) ;

DPB1\*020106 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttTgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggaggagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggggcg  
ggcccatgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 2 8 ) ;

DPB1\*0202 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagCtcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgaGcgggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggggcg  
ggccCATgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 2 9 ) ;

DPB1\*030101 :

agaattacgtgtaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgaggagta  
ctggaacagccagaaggacCtcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgagtcc (配列番号 : 3 0 ) ;

DPB1\*030102 :

agaattacgtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgaggacta  
ctggaacagccagaaggacCtcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctAcagcgccgag (配列番号 : 3 1 ) ;

DPB1\*0401 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagTcgcgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgctgcggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtgacagacacaactacgagctggGcg  
ggcccatgaccctgcagcgccgagtcc (配列番号 : 3 2 ) ;

DPB1\*0402 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgAggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtgacagacacaactacgagctggGcg  
ggcccatgaccctgcagcgccgagtcc (配列番号 : 3 3 ) ;

DPB1\*0501 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagCtcgtTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgaGcgggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtgacagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 3 4 ) ;

DPB1\*0601 :

agaattacgtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgaggagta

ctggaacagccagaaggacCtcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatGtgcacacaaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcag (配列番号 : 3 5) ;

DPB1\*0801 :

ctttccaggagcggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccgggagga  
gttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgAggagtactggaaca  
gccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacagggtatgcagacaaactacgagctggacgaggccgtg  
accctgcag (配列番号 : 3 6) ;

DPB1\*0901 :

agaattacgtgcaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggaCta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacagggtatgcagacaaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 3 7) ;

DPB1\*1001 :

agaattacgtgcaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgAggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacagggtatgcagacaaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 3 8) ;

DPB1\*110101 :

gtgtaccagttaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccggCagga  
gtacgcgcgcttcgacagcgacgtgggagagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcgagtagtgaaca  
gccagaaggacctcctggaggagaggcgggcagtgccggacaggatgtgcagacaaactacgagctggacgaggccgtg  
accctgcag (配列番号 : 3 9) ;

DPB1\*110102 :

agaattacgtgtaccagttaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
Aggcaggagtacgcgcgcttcgacagcgacgtgggagagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgaggagta  
ctggaacagccagaaggacctcctggaggagaggcgggcagtgccggacaggatgtgcagacaaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcag (配列番号 : 4 0) ;

DPB1\*1301 :

agaattacgtgtaccagttaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtagcgcgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggAtatgcagacaaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcag (配列番号 : 4 1) ;

DPB1\*1401 :

agaattacgtgcaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggaCta  
ctggaacagccagaaggacCtcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacaaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcag (配列番号 : 4 2) ;

DPB1\*1501 :

agaattacgtgtaccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cggCaggagtacgcgcgcttcgacagcgacgtgggagagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgaggagta  
ctggaacagccagaaggacctcctggaggagaggcgggcagtgccggacaggatgtgcagacaaactacgagctggtcg  
ggcccAtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 4 3) ;

DPB1\*1601 :

agaattacctttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgAggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatGtgacacaaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 4 4) ;

DPB1\*1701 :

agaattacgtgcaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggaCta

ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatGtcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 4 5) ;

DPB1\*1801 :

gtgtaccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccgggagga  
gttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatGaggagtactggaaca  
gccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggTcggggccatg  
accctgcag (配列番号 : 4 6) ;

DPB1\*1901 :

agaattacctttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgaGgcggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggAtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 4 7) ;

DPB1\*200101 :

agaattacgtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgaggaCta  
ctggaacagccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 4 8) ;

DPB1\*200102 :

agaattacgtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgaggacta  
ctggaacagccagaaggacctcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgTcga (配列番号 : 4 9) ;

DPB1\*2101 :

agaattacgtgtaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagCtcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgaGgcggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatGtcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 5 0) ;

DPB1\*2201 :

agaattacctttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagCtcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgaGgcggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatGtcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 5 1) ;

DPB1\*2301 :

agaattacctttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgctgaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtcagacacaactacgagctggGcg  
ggcccatgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 5 2) ;

DPB1\*2401 :

agaattacctttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgaGgcggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctgggGg  
ggccAtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 5 3) ;

DPB1\*2501 :

agaattacgtgtaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatGaggagta  
ctggaacagccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 5 4) ;

DPB1\*260101 :

gtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccgggagga  
gtacgcgcgttcgacagcgacgtgggagagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgctgaggagtactggaaca

gccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacagAgtatgcagacacaactacgagctggacgaggccgtg  
accctgcagcgccgag (配列番号 : 5 5) ;

DPB1\*260102 :

gtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccgggagga  
gtacgcgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagtactggaaca  
gccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacgaggccgtg  
accctgcagcgccga (配列番号 : 5 6) ;

DPB1\*2701 :

agaattacgtgtaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttacgcgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtgacagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 5 7) ;

DPB1\*2801 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgcgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatAggagta  
ctggaacagccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggTcg  
ggcccatgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 5 8) ;

DPB1\*2901 :

agaattacgtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggaCta  
ctggaacagccagaaggacCtctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 5 9) ;

DPB1\*3001 :

agaattacgtgcaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgaGcggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatGtgacagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcag (配列番号 : 6 0) ;

DPB1\*3101 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgcgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagta  
ctggaacagccagaaggacctcctggaggagaagcgggcaTtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 6 1) ;

DPB1\*3201 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggTgta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggaggagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctgggcg  
ggcccatgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 6 2) ;

DPB1\*3301 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgcgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatGtgacagacacaactacgagctggGcg  
ggcccatgaccctgcag (配列番号 : 6 3) ;

DPB1\*3401 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagctcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagta  
ctggaacagccagaaggacctcctggaggagaagcgggcaTtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggtcg  
ggccAtgaccctgcag (配列番号 : 6 4) ;

DPB1\*3501 :

agaattacgtgcaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggaCta

ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcag (配列番号：65) ;

DPB1\*3601 :

agaattacgtgtaccagtTacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagTctgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgaGcgggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtgacagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号：66) ;

DPB1\*3701 :

gtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccgggagga  
gttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgAggagtactggaaca  
gccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacgaggccgtg  
accctgcagcgccgag (配列番号：67) ;

DPB1\*3801 :

cttttcaggagcggcaggaatgctacCcggtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccgggagga  
gctcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgaggcggagtactggaaca  
gccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggacgaggccgtg  
accctgcag (配列番号：68) ;

DPB1\*3901 :

agaattaccttttcaggagcggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtacgcgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtgacagacacaactacgagctggGcg  
ggcccatgaccctgcagcgccga (配列番号：69) ;

DPB1\*4001 :

agaattaccttttcaggagcggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtacgcgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggTcg  
ggcccatgaccctgcagcgccga (配列番号：70) ;

DPB1\*4101 :

aattaccttttcaggagcggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccg  
ggaggagtctgctgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggagtact  
ggaacagccagaaggacTtcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctgggcggg  
cccatgaccctgcagcgccga (配列番号：71) ;

DPB1\*4401 :

agaattacgtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagTctgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggacta  
ctggaacagccagaaggacTtcctggaggagGagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号：72) ;

DPB1\*4501 :

gtgcaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccgggagga  
gttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgAggagtactggaaca  
gccagaaggacTtcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacgaggccgtg  
accctgcag (配列番号：73) ;

DPB1\*4601 :

agaattaccttttcaggagcggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtctgctgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggacTta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctgggcg  
ggcccAtgaccctgcagcgccgag (配列番号：74) ;

DPB1\*4701 :

agaattaccttttcaggagcggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtctgctgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgaGcgggagta



ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctgggcg  
ggcccAtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 7 5) ;

DPB1\*4801 :

aattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccg  
ggaggagTctgtgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatGaggagtact  
ggaacagccagaaggacatcctggaggaggagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggGcggg  
cccAtgaccctgcag (配列番号 : 7 6) ;

DPB1\*4901 :

aattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccg  
ggaggagtacgcgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatGaggagtact  
ggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtgcagacacaactacgagctggGcggg  
cccatgaccctgcag (配列番号 : 7 7) ;

DPB1\*5001 :

aattacgtgtaccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccg  
ggaggagttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgaggaCtact  
ggaacagccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacgag  
gccgtgaccctgcag (配列番号 : 7 8) ;

DPB1\*5101 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtTgcgcgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatGaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtgcagacacaactacgagctggGcg  
ggcccatgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 7 9) ;

DPB1\*5201 : agaattacgtgtaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagat  
acatctacaaccgggaggagtTcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccct  
gctgcgagtagtactggaacagccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaacta  
cgagctggacgaggccgtgaccctgcag (配列番号 : 8 0) ;

DPB1\*5301 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtacgcgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatGaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggTcg  
ggcccatgaccctgcag (配列番号 : 8 1) ;

DPB1\*5401 :

agaattacgtgcaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgaGcgggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcag (配列番号 : 8 2) ;

DPB1\*5501 :

agaattacgtgcaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgctgcgagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatGtgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcag (配列番号 : 8 3) ;

DPB1\*5601 :

gtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccgggagga  
gtTgcgcgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgctgcgagtagtactggaaca  
gccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacgaggccgtg  
accctgcag (配列番号 : 8 4) ;

DPB1\*5701 :

cttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccgggagga  
gttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgaggaCtactggaaca  
gccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacgaggccg (



配列番号 : 8 5 ) ;

DPB1\*5801 : aattacgtgcaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatac  
atctacaaccgggaggagCtcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgc  
tgcggagtactggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatGtgcagacacaactacg  
agctggacgaggccgtgaccctgcag (配列番号 : 8 6 ) ;

DPB1\*5901 : agaattacctttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagat  
acatctacaaccgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcct  
gatgAggagtactggaacagccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtgcagacacaacta  
cgagctggGcgggcccattgaccctgcag (配列番号 : 8 7 ) ;

DPB1\*6001 :

agaattacctttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggagta  
ctggaacagccagaaggacaAcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctgggcg  
ggcccatgaccctgcag (配列番号 : 8 8 ) ;

DPB1\*6101N :

agaattacgtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggacta  
ctggaacagccagaaggacctcctgTaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgc (配列番号 : 8 9 ) ;

DPB1\*6201 :

agaattacctttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagCtcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggTcg  
ggcccatgaccctgcag (配列番号 : 9 0 ) ;

DPB1\*6301 :

aattacctttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccg  
ggaggagCtcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagtact  
ggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtgcagacacaactacgagctggacgag  
gccgtgaccctgcag (配列番号 : 9 1 ) ;

DPB1\*6401N :

aattaagtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccg  
ggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggatCtact  
ggaacagccagaaggacCtctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatGtgcagacacaactacgagctggacgag  
gccgtgaccctgcag (配列番号 : 9 2 ) ;

DPB1\*6501 :

agaattacctttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtacgcgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgcgag (配列番号 : 9 3 ) ;

DPB1\*6601 :

agaattacgtgcaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtTcgcgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtgcagacacaactacgagctggGcg  
ggcccatgaccctgcagcgcgag (配列番号 : 9 4 ) ;

DPB1\*6701 :

agaattacgtgcaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagta  
ctggaacagccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgcgag (配列番号 : 9 5 ) ;

DPB1\*6801 :

agaattacctttccagggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgAggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccga (配列番号 : 9 6) ;

DPB1\*6901 :

agaattacgtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgaggaCta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaGcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgacc (配列番号 : 9 7) ;

DPB1\*7001 :

aattacgtggaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccg  
ggaggagtttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgaggaCtact  
ggaacagccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacgag  
gccgtgaccctgcag (配列番号 : 9 8) ;

DPB1\*7101 :

aattacctttccagggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccg  
ggaggagtttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgctgaggagtact  
ggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatGtgcagacacaactacgagctggGcggg  
cccatgaccctgcag (配列番号 : 9 9) ;

DPB1\*7201 :

aattacctttccagggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccg  
ggaggagtttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgctgaggagtact  
ggaacagccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtgcagacacaactacgagctggGcggg  
cccatgaccctgcag (配列番号 : 1 0 0) ;

DPB1\*7301 :

aattacctttccagggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccg  
ggaggagtttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgAggagtact  
ggaacagccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggGcggg  
cccatgaccctgcag (配列番号 : 1 0 1) ;

DPB1\*7401 :

gtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccggCagga  
gtacgcgcgcttcgacagcgacgtgggagagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgctgaggagtactggaaca  
gccagaaggacatcctggaggagaggcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctgggtcgggcccAtg  
accctgcag (配列番号 : 1 0 2) ;

DPB1\*7501 :

ctttccagggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaaccgggagga  
gttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgAggagtactggaaca  
gccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggGcgggcccctg  
accctgcag (配列番号 : 1 0 3) ;

DPB1\*7601 :

agaattacgtgcaccagtTaccggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgaggaCta  
ctggaacagccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcag (配列番号 : 1 0 4) ;

DPB1\*7701 :

agaattacctttccagggacTgcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtttcgTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcgccctgatgaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctgggag  
ggcccctgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 1 0 5) ;

DPB1\*7801 :

agaattacgtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggacta  
ctggaacagccagaaggacctcctggaggagaagcgggcagtgctggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 1 0 6) ;

DPB1\*7901 :

agaattacgtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 1 0 7) ;

DPB1\*8001 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctgggagc  
ggccatgacc (配列番号 : 1 0 8) ;

DPB1\*8101 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggGcg  
ggccatgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 1 0 9) ;

DPB1\*8201 : agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagat  
acatctacaaccgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcct  
gatgaggagtagtgaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaacta  
cgagctggggcgccatgaccctgcagcAccgag (配列番号 : 1 1 0) ;

DPB1\*8301 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggagta  
ctggaacagccagaaggacTtcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctgggagc  
ggccatgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 1 1 1) ;

DPB1\*8401 :

agaattaccttttccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgaGgaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccga (配列番号 : 1 1 2) ;

DPB1\*8501 :

agaattacgtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttacgcgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcAccgag (配列番号 : 1 1 3) ;

DPB1\*8601 :

gaattacgtgcaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaacc  
gggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctgggagc  
ggccatgaccctgcagcgccga (配列番号 : 1 1 4) ;

DPB1\*8701 :

agaattacgtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgaggagta  
ctggaacagccagaaggacTtcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctgggagc  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号 : 1 1 5) ;

DPB1\*8801 :

agaattacgtgtaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac

cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggaCta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号: 1 1 6) ;

DPB1\*8901 :

agaattacgtgtaccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtagcgcgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号: 1 1 7) ;

DPB1\*9001 :

agaattacgtgtaccaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtagcgcgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号: 1 1 8) ;

DPB1\*9101 :

agaattacgtgcaccagttacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggaCta  
ctggaacagccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatGtcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号: 1 1 9) ;

DPB1\*9201 :

agaattacgtgtaccagtTacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgaggaCta  
ctggaacagccagaaggacCtctggaggagaagcgggcagtgccggacagggtatgcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号: 1 2 0) ;

DPB1\*9301 :

agaattacgtgtaccagtTacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagttcgtTgcgcttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgatgAggagta  
ctggaacagccagaaggacatcctggaggagGagcgggcagtgccggacaggatGtcagacacaactacgagctggacg  
aggccgtgaccctgcagcgccgag (配列番号: 1 2 1) ;

DPB1\*9601 :

agaattaccttttcaggacggcaggaatgctacgcgtttaatgggacacagcgcttcctggagagatacatctacaac  
cgggaggagtagcgcgcgttcgacagcgacgtgggggagttccgggcggtgacggagctggggcggcctgctgcggagta  
ctggaacagccagaagCacatcctggaggagaagcgggcagtgccggacaggatgtgcagacacaactacgagctgggcg  
ggcccatgaccctgcagcgccgag (配列番号: 1 2 2) ;

以下、プローブリスト 1 ~ 4 を表 1 ~ 4 のそれぞれに示す。

【 0 0 2 1 】

## 【表 1】

表 1

プローブ番号	塩基配列
0	acg cat aga cca aca ggG (配列番号：1 2 3)
1	ag ttt atg ttt gaa ttt gat gaA (配列番号：1 2 4)
2	t ctg gag gag ttt ggc cA (配列番号：1 2 5)
3	g acg cat aga cca aca ggA (配列番号：1 2 6)
4	g ttt atg ttt gaa ttt gat gaC (配列番号：1 2 7)
5	cac act cag gcc gcc aaT (配列番号：1 2 8)
6	ttc tat gtg gat ctg gat aaA (配列番号：1 2 9)
7	ctg gag gag ttt ggc caa A (配列番号：1 3 0)
8	ctg gag gag ttt ggc cG (配列番号：1 3 1)
9	gcc gcg ttt gta cag acC (配列番号：1 3 2)
10	t gaa ttt gat gaa gat gag cA (配列番号：1 3 3)
11	ag ttc tat gtg gat ctg gaT (配列番号：1 3 4)
12	g acc cat aga cca aca ggA (配列番号：1 3 5)
13	t gcc atg ttt gta cag acC (配列番号：1 3 6)
14	at gtg tca act tat gcc aT (配列番号：1 3 7)
15	ctg gct aac att gct ata tC (配列番号：1 3 8)
16	cat gtg tca act tat gcc aT (配列番号：1 3 9)
17	aac aac aac ttg aat atc gcT (配列番号：1 4 0)

【0 0 2 2】

## 【表 2】

表 2 - 1

プローブ番号	塩基配列
0	gca gtg ccg gac agg G (配列番号: 1 4 1)
1	ca gtg ccg gac agg gtA (配列番号: 1 4 2)
2	tc gac agc gac gtg ggA (配列番号: 1 4 3)
3	c aac cgg gag gag ttc gT (配列番号: 1 4 4)
4	ctg ggg cgg cct gat gA (配列番号: 1 4 5)
5	g gac atc ctg gag gag G (配列番号: 1 4 6)
6	ca gtg ccg gac agg atG (配列番号: 1 4 7)
7	a cac aac tac gag ctg gG (配列番号: 1 4 8)
8	g ctg ggg cgg cct gaC (配列番号: 1 4 9)
9	ag gag gag cgg gca gtT (配列番号: 1 5 0)
10	ga tac atc tac aac cgg gaA (配列番号: 1 5 1)
11	c tac aac cgg gag gag ttT (配列番号: 1 5 2)
12	c tac aac cgg gag gag C (配列番号: 1 5 3)
13	g ctg ggg cgg cct gaG (配列番号: 1 5 4)
14	gag ctg ggc ggg ccc A (配列番号: 1 5 5)
15	ag aat tac gtg tac cag tT (配列番号: 1 5 6)
16	gg cgg cct gat gag gaC (配列番号: 1 5 7)
17	gg aac agc cag aag gac C (配列番号: 1 5 8)
18	ac gag gcc gtg acc ctA (配列番号: 1 5 9)
19	c tac aac cgg gag gag tT (配列番号: 1 6 0)
20	aac cgg gag gag ctc gT (配列番号: 1 6 1)
21	g gac ctc ctg gag gag G (配列番号: 1 6 2)
22	ag aat tac gtg cac cag tT (配列番号: 1 6 3)
23	aga tac atc tac aac cgg C (配列番号: 1 6 4)
24	g gag aga tac atc tac aac A (配列番号: 1 6 5)
25	g gca gtg ccg gac agg A (配列番号: 1 6 6)
26	gag ctg gtc ggg ccc A (配列番号: 1 6 7)
27	ga cac aac tac gag ctg gT (配列番号: 1 6 8)
28	cc gtg acc ctg cag cgT (配列番号: 1 6 9)
29	gg gca gtg ccg gac agA (配列番号: 1 7 0)
30	g gag gag aag cgg gca T (配列番号: 1 7 1)

## 【0 0 2 3】

## 【表 3】

表 2 - 2

プローブ番号

塩基配列

31	ggg cgg cct gat gag gT (配列番号: 172)
32	ga cgg cag gaa tgc tac C (配列番号: 173)
33	gg aac agc cag aag gac T (配列番号: 174)
34	g gac ttc ctg gag gag G (配列番号: 175)
35	gg aac agc cag aag gac aA (配列番号: 176)
36	gc cag aag gac ctc ctg T (配列番号: 177)
37	gac ctc ctg gag gag aG (配列番号: 178)
38	aat tac ctt ttc cag gga cT (配列番号: 179)
39	gag aag cgg gca gtg cT (配列番号: 180)
40	ccc atg acc ctg cag cA (配列番号: 181)
41	tg ggg cgg cct gag gA (配列番号: 182)
42	gcc gtg acc ctg cag cA (配列番号: 183)
43	g aat tac gtg cac cag tT (配列番号: 184)
44	ac tgg aac agc cag aag C (配列番号: 185)

## 【0 0 2 4】

## 【表 4】

表 3

プローブ番号

塩基配列

0	a cca aca ggG gag ttt atg (配列番号: 186)
1	gaa ttt gat gaA gat gag atg (配列番号: 187)
2	ag ttt ggc cAa gcc ttt tc (配列番号: 188)
3	ga cca aca ggA gag ttt atg (配列番号: 189)
4	gaa ttt gat gaC gat gag atg (配列番号: 190)
5	at ctg gat aaA aag gag acc (配列番号: 191)
6	ttt ggc caa Acc ttt tcc tt (配列番号: 192)
7	ag ttt ggc cGa gcc ttt tc (配列番号: 193)
8	t gta cag acC cat aga cca (配列番号: 194)
9	gaa gat gag cAg ttc tat gt (配列番号: 195)
10	cg ttt gta caA acc cat aga (配列番号: 196)
11	g gat ctg gaT aag aag gag (配列番号: 197)
12	act tat gcc aTg ttt gta cag (配列番号: 198)
13	att gct ata tCg aac aac aac (配列番号: 199)
14	g aat atc gcT atc cag cgt (配列番号: 200)

## 【0 0 2 5】

## 【表 5】

## 表 4 - 1

## プローブ番号

## 塩基配列

0	tAc cag gga cgg cag ga (配列番号 : 2 0 1)
1	ccg gac agg Gta tgc aga (配列番号 : 2 0 2)
2	g gac agg gtA tgc aga ca (配列番号 : 2 0 3)
3	gac gtg ggA gag ttc cg (配列番号 : 2 0 4)
4	at tac ctt tTc cag gga cg (配列番号 : 2 0 5)
5	g gag ttc gTg cgc ttc g (配列番号 : 2 0 6)
6	gg cct gat gAg gag tac t (配列番号 : 2 0 7)
7	g gag gag Gag cgg gca (配列番号 : 2 0 8)
8	g gac agg atG tgc aga ca (配列番号 : 2 0 9)
9	gag ctg gGc ggg ccc (配列番号 : 2 1 0)
10	cgg cct gaC gag gag ta (配列番号 : 2 1 1)
11	cgg gca gtT ccg gac ag (配列番号 : 2 1 2)
12	c aac cgg gaA gag ttc gt (配列番号 : 2 1 3)
13	g gag gag ttT gtg cgc tt (配列番号 : 2 1 4)
14	g gag gag Ctc gtg cgc (配列番号 : 2 1 5)
15	cgg cct gaG gcg gag t (配列番号 : 2 1 6)
16	c ggg ccc Atg acc ctg (配列番号 : 2 1 7)
17	tg tac cag tTa cgg cag g (配列番号 : 2 1 8)
18	t gat gag gaC tac tgg aac (配列番号 : 2 1 9)
19	cag aag gac Ctc ctg gag (配列番号 : 2 2 0)
20	gtg acc ctA cag cgc cg (配列番号 : 2 2 1)
21	g gag gag tTc gcg cgc (配列番号 : 2 2 2)
22	g gag ctc gTg cgc ttc g (配列番号 : 2 2 3)
23	aat tac gtg Cac cag tta cg (配列番号 : 2 2 4)
24	tac aac cgg Cag gag tac (配列番号 : 2 2 5)
25	atc tac aac Agg cag gag t (配列番号 : 2 2 6)
26	ccg gac agg Ata tgc aga (配列番号 : 2 2 7)
27	c gag ctg gTc ggg ccc (配列番号 : 2 2 8)
28	g ccg gac agA gta tgc ag (配列番号 : 2 2 9)
29	g cac cag tTa cgg cag g (配列番号 : 2 3 0)
30	g cgg gca Ttg ccg gac (配列番号 : 2 3 1)

【0 0 2 6】



## 【表 6】

表 4 - 2

プローブ番号

塩基配列

31	ct gat gag gTg tac tgg aa (配列番号：2 3 2)
32	gaa tgc tac Ccg ttt aat gg (配列番号：2 3 3)
33	cag aag gac Ttc ctg gag (配列番号：2 3 4)
34	ag aag gac aAc ctg gag g (配列番号：2 3 5)
35	gac ctc ctg Tag gag aag (配列番号：2 3 6)
36	g gag gag aGg cgg gca (配列番号：2 3 7)
37	g gac cag tTa cgg cag g (配列番号：2 3 8)
38	tc cag gga cTg cag gaa t (配列番号：2 3 9)
39	g gca gtg cTg gac agg g (配列番号：2 4 0)
40	g ctg ggc gGg ccc atg (配列番号：2 4 1)
41	cgg cct gaG gag gag ta (配列番号：2 4 2)
42	gg cct gag gAg gag tac t (配列番号：2 4 3)
43	agc cag aag Cac atc ctg (配列番号：2 4 4)

## 【0 0 2 7】

以下、アレループローブ対応リスト 1 ～ 4 を表 5 ～ 8 に示す。

## 【0 0 2 8】

## 【表 7】

表 5

アリル番号	検出用のプローブ番号			
DPA1*010301	0	1	2	
DPA1*010302	3			
DPA1*0104	4			
DPA1*0105	5			
DPA1*0106	6			
DPA1*0107	7			
DPA1*0108	4	8		
DPA1*020101	9	6	5	
DPA1*020102	6	5		
DPA1*020103	10	5		
DPA1*020104	6	5		
DPA1*020105	3	10	5	
DPA1*020106	9	11	5	
DPA1*020201	12	11	5	
DPA1*020202	13	12	10	5
DPA1*020203	14	5		
DPA1*0203	9	5		
DPA1*0301	15			
DPA1*0302	16			
DPA1*0401	17			

【 0 0 2 9 】

【表 8】

表 6 - 1

アリル番号

検出用のプローブ番号

DPB1*010101	0	1			
DPB1*010102	2				
DPB1*020102	3	4	5	6	7
DPB1*020103	8				
DPB1*020104	9				
DPB1*020105	10				
DPB1*020106	11				
DPB1*0202	12	13	5	14	
DPB1*030101	15	3	16	17	
DPB1*030102	18				
DPB1*0401	19	6	7		
DPB1*0402	3	4	6	7	
DPB1*0501	12	20	13	6	
DPB1*0601	16	17	21	6	
DPB1*0801	3	4	5		
DPB1*0901	22	16	5		
DPB1*1001	22	3	4	5	
DPB1*110101	23				
DPB1*110102	24				
DPB1*1301	15	5	25		
DPB1*1401	22	3	16	17	
DPB1*1501	23	26			
DPB1*1601	3	4	5	6	
DPB1*1701	22	16	5	6	
DPB1*1801	3	4	27		
DPB1*1901	13	5	25		
DPB1*200101	16	17	6		
DPB1*200102	28				
DPB1*2101	15	12	13	5	6
DPB1*2201	12	13	5	6	

【0 0 3 0】

【表 9】

表 6 - 2

アリル番号

検出用のプローブ番号

DPB1*2301	3	6	7		
DPB1*2401	13	14			
DPB1*2501	15	3	4	17	
DPB1*260101	29				
DPB1*2701	15	6			
DPB1*2801	4	17	27		
DPB1*2901	16	17	21		
DPB1*3001	22	13	5	6	
DPB1*3101	30				
DPB1*3201	31				
DPB1*3301	5	6	7		
DPB1*3401	30	26			
DPB1*3501	22	3	16		
DPB1*3601	15	12	20	13	6
DPB1*3701	3	4	5		
DPB1*3801	32				
DPB1*3901	6	7			
DPB1*4001	27				
DPB1*4101	33	34			
DPB1*4401	12	17	21		
DPB1*4501	3	4	17		
DPB1*4601	16	5	14		
DPB1*4701	13	5	14		
DPB1*4801	12	4	7	14	
DPB1*4901	4	6	7		
DPB1*5001	3	16	17		
DPB1*5101	19	4	6	7	
DPB1*5201	15	3	17		
DPB1*5301	4	27			
DPB1*5401	22	13	5		

【 0 0 3 1 】

## 【表 1 0】

表 6 - 3

アリル番号

検出用のプローブ番号

DPB1*5501	22	3	5	6
DPB1*5601	19	17		
DPB1*5701	3	16	17	
DPB1*5801	12	5	6	
DPB1*5901	4	17	6	7
DPB1*6001	35			
DPB1*6101N	36			
DPB1*6201	12	20	27	
DPB1*6301	12	6		
DPB1*6401N	16	17	21	6
DPB1*6601	22	19	6	7
DPB1*6701	22	3	17	
DPB1*6801	3	4		
DPB1*6901	16	37		
DPB1*7001	3	16	17	
DPB1*7101	3	5	6	7
DPB1*7201	17	6	7	
DPB1*7301	4	17	7	
DPB1*7401	23	26		
DPB1*7501	3	4	7	
DPB1*7601	22	16	17	
DPB1*7701	38			
DPB1*7801	39			
DPB1*7901	15	3	4	
DPB1*8001	16	14		
DPB1*8101	4	5	6	7
DPB1*8201	14	40		
DPB1*8301	33			
DPB1*8401	13	41		
DPB1*8501	15	42		

【 0 0 3 2 】

## 【表 1 1】

表 6 - 4

アリル番号

検出用のプローブ番号

DPB1*8601	43	16	5	14
DPB1*8701	15	3	17	6
DPB1*8801	15	16	5	
DPB1*8901	6			
DPB1*9001	19			
DPB1*9101	16	17	6	
DPB1*9201	15	16	17	
DPB1*9301	15	3	4	5 6
DPB1*9601	44			

## 【0 0 3 3】

## 【表 1 2】

表 7

アリル番号

検出用のプローブ番号

DPA1*010301	0	1	2
DPA1*010302	3		
DPA1*0104	4		
DPA1*0106	5		
DPA1*0107	6		
DPA1*0108	4	7	
DPA1*020101	8	5	7
DPA1*020102	5	7	
DPA1*020103	9	7	
DPA1*020104	10		
DPA1*020105	3	9	7
DPA1*020106	8	11	7
DPA1*020201	3	11	7
DPA1*020202	8	3	9 7
DPA1*020203	12	7	
DPA1*0203	8	7	
DPA1*0301	13		
DPA1*0302	12		
DPA1*0401	14		

## 【0 0 3 4】

【表 1 3】

表 8 - 1

アリル番号

検出用のプローブ番号

DPB1*010101	0	1	2			
DPB1*010102	3					
DPB1*020102	4	5	6	7	8	9
DPB1*020103	10					
DPB1*020104	11					
DPB1*020105	12					
DPB1*020106	13					
DPB1*0202	14	15	7	16		
DPB1*030101	17	5	18	19		
DPB1*030102	20					
DPB1*0401	4	21	8	9		
DPB1*0402	4	5	6	8	9	
DPB1*0501	4	14	22	15	8	
DPB1*0601	18	19	7	8		
DPB1*0801	5	6	7			
DPB1*0901	23	18	7			
DPB1*1001	23	6	7			
DPB1*110101	17	24				
DPB1*110102	25					
DPB1*1301	17	7	26			
DPB1*1401	23	5	18	19		
DPB1*1501	24	16				
DPB1*1601	4	5	6	7	8	
DPB1*1701	23	18	7	8		
DPB1*1801	5	6	27			
DPB1*1901	4	15	7	26		
DPB1*200101	18	19	8			
DPB1*200102	18	19	8			

【 0 0 3 5】

【表 1 4】

表 8 - 2

アリル番号	検出用のプローブ番号				
DPB1*2101	17	14	15	7	8
DPB1*2201	4	14	15	7	8
DPB1*2301	4	5	8	9	
DPB1*2401	15	16			
DPB1*2501	17	5	6	19	
DPB1*260101	28				
DPB1*260102	17				
DPB1*2701	17	8			
DPB1*2801	6	19	27		
DPB1*2901	18	19	7		
DPB1*3001	23	29	15	7	8
DPB1*3101	30				
DPB1*3201	31				
DPB1*3301	4	7	8	9	
DPB1*3401	30	16			
DPB1*3501	23	5	18		
DPB1*3601	17	14	22	15	8
DPB1*3701	17	5	6	7	
DPB1*3801	32				
DPB1*3901	4	8	9		
DPB1*4001	4	27			
DPB1*4101	33	7			
DPB1*4401	14	19	7		
DPB1*4501	29	5	6	19	
DPB1*4601	4	18	7	16	
DPB1*4701	15	7	16		
DPB1*4801	14	6	9	16	
DPB1*4901	6	8	9		
DPB1*5001	5	18	19		
DPB1*5101	4	21	6	8	9

【0 0 3 6】



【表 1 5】

表 8 - 3

アリル番号	検出用のプローブ番号				
DPB1*5201	17	5	19		
DPB1*5301	4	6	27		
DPB1*5401	23	29	15	7	
DPB1*5501	23	7	8		
DPB1*5601	17	21	19		
DPB1*5701	5	18	19		
DPB1*5801	29	14	7	8	
DPB1*5901	6	19	8	9	
DPB1*6001	34				
DPB1*6101N	35				
DPB1*6201	14	22	27		
DPB1*6301	14	8			
DPB1*6401N	18	19	7	8	
DPB1*6501	4				
DPB1*6601	23	16			
DPB1*6701	23	5	19		
DPB1*6801	4	5	6		
DPB1*6901	18	36			
DPB1*7001	37	5	18	19	
DPB1*7101	5	7	8	9	
DPB1*7201	19	8	9		
DPB1*7301	6	19	9		
DPB1*7401	17	24	16		
DPB1*7501	5	6	9		
DPB1*7601	23	18	19		
DPB1*7701	38				
DPB1*7801	39				
DPB1*7901	17	5	6		
DPB1*8001	4	18	40		
DPB1*8101	4	6	7	8	9

【 0 0 3 7 】

【表 1 6】

表 8 - 4

アリル番号

検出用のプローブ番号

DPB1*8201	4	5	6	8	9
DPB1*8301	33				
DPB1*8401	41	42			
DPB1*8501	17	8			
DPB1*8601	23	7	16		
DPB1*8701	17	5	19	8	
DPB1*8801	17	18	7		
DPB1*8901	8				
DPB1*9001	21				
DPB1*9101	23	19	8		
DPB1*9201	17	18	19		
DPB1*9301	17	5	6	7	8
DPB1*9601	43				

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 HLA-DPの各アリルを個別に同定するために有用であるプローブセット及びそれを用いたHLA-DPのアリルの同定方法を提供すること。

【解決手段】 HLA-DPの各アリルに特有の塩基を含む部分配列のすべてを網羅するプローブからプローブセットを構成し、これを用いて検体に含まれるHLA-DPを同定する。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 3 - 4 3 0 5 5 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 1 0 0 7 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号

氏 名

キャノン株式会社